



## **ATLANTIS**

**MB/PC250 - MB/PC260**

**LIBRETTO DI ISTRUZIONI**

## AVVERTENZE

### Sicurezza durante l'installazione

- Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo della poltrona, leggere attentamente il manuale d'istruzioni avendo cura di seguire tutte le indicazioni e le avvertenze ivi contenute. Sono riportate importanti informazioni di sicurezza in fase di installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto!
- Dopo aver tolto l'imballaggio verificare l'integrità e la completezza del contenuto. In caso di dubbi, non utilizzare il prodotto e contattare il nostro customer service.
- La poltrona Atlantis va posizionata su di una superficie piana, livellata e in grado di sopportare il peso della poltrona quando l'apparecchiatura è caricata, facendo riferimento al carico massimo ammissibile.
- **Attenzione! Per una corretta e sicura installazione, si raccomanda di spostare la poltrona Atlantis come illustrato in fig. 2 e mai come in fig. 3.**

### Sicurezza durante l'utilizzo

- L'apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il qual è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli, i quali comportano la perdita di ogni diritto di garanzia.
- L'utilizzo è consentito al solo personale che esegue il trattamento (podologo, estetista).
- I bambini non devono essere lasciati incustoditi in vicinanza dell'apparecchio.

### Sicurezza durante la manutenzione

- Pulizia e manutenzione devono essere effettuate soltanto da persone qualificate per tale attività e non devono essere effettuate da parte di persone che non ne conoscano il funzionamento.

### Trasporto / Stoccaggio / Requisiti di utilizzo

Il trasporto deve avvenire esclusivamente all'interno dell'imballaggio originale.

Trasporto e conservazione a temperatura: da -20° C a +50° C

Temperatura di utilizzo: da +10° C a +40° C

Umidità relativa dell'aria: max. 90%, senza condensa

Evitare brusche variazioni di temperatura, per evitare la formazione di condensa.

### USO PREVISTO

La poltrona Atlantis è stata progettata per offrire il massimo del comfort durante trattamenti podologici e pedicure. Ruotando di 90° assicura la facilità d'uso tanto da parte del cliente quanto da parte dell'operatore. La poltrona poggia su di una struttura rettangolare in acciaio inox sulla quale è collocata una vasca per pedicure in tecnopolimero bianco, completa di mixer, doccia e sistema di scarico a pavimento. Atlantis è dotata anche di un poggiapiedi imbottito regolabile in altezza e avanti/indietro e, solo per versione MB/PC260, di massaggio dorso lombare.


## COMPONENTI

La fig.1 riporta i principali componenti della poltrona per trattamenti podologici Atlantis.

Legenda:

1. Base in acciaio inox
2. Vasca per pedicure in materiale plastico
3. Rubinetteria: miscelatore e doccia estraibile
4. Poggiapiedi regolabile
5. Poltrona girevole (90°)
6. Pulsantiera comando massaggio **(SOLO PER VERSIONE MB/PC260)**

Fig. 1

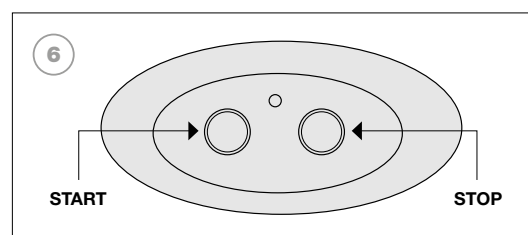

## INSTALLAZIONE

**Attenzione! Per una corretta e sicura installazione, si raccomanda di spostare la poltrona Atlantis come illustrato in fig. 2 e mai come in fig. 3.**

Fig. 2


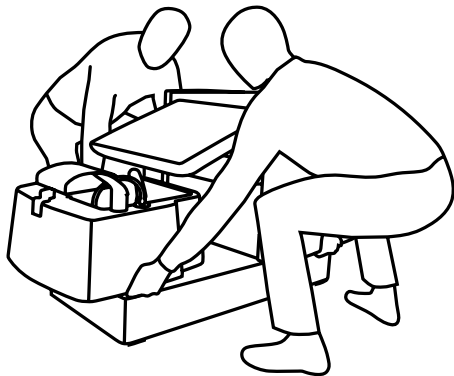


Fig. 3

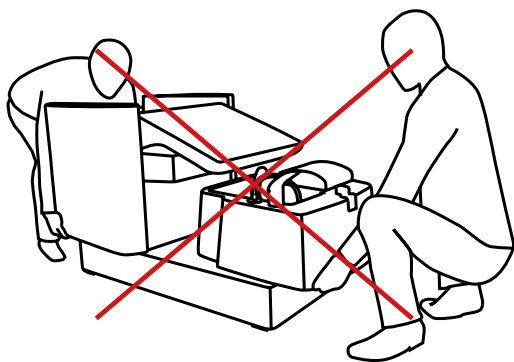


Per procedere all'installazione:

1. Rimuovere il pannello posteriore della poltrona e montare lo schienale
2. Rimuovere i pannelli in acciaio posteriore e anteriore della base
3. Posizionare il fermo di semi-rotazione dal lato desiderato
4. Regolare i piedini regolabili, se necessario
5. Tracciare a suolo, forare e tassellare la struttura tramite i quattro angolari regolabili
6. Collegare lo scarico e alimentazione idrica, vedi fig. 4
7. Verificare la tenuta dell'allacciamento idrico e dell'evacuazione
8. Ripristinare le pannellature

Fig. 4

- A= CARICO ACQUA FREDDA 3/8"
- B= SCARICO 0/40
- C= CARICO ACQUA CALDA 3/8"
- D= PRESA ELETTRICA (SOLO PER VERSIONE MB/PC260)

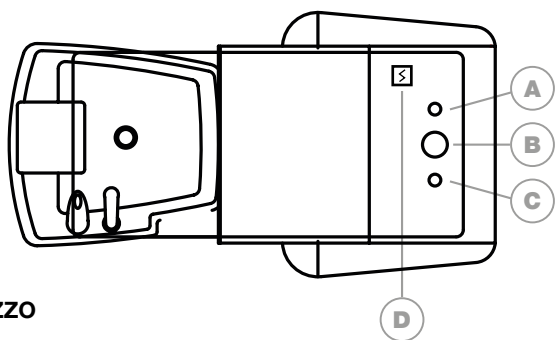

### UTILIZZO

Per procedere all'utilizzo:

1. Ruotare la poltrona per fare accomodare il cliente
2. Regolare il cuscinetto poggiatesta in altezza tramite il volantino frontale e avanti/indietro tramite i due volantini sotto il cuscinetto
3. **(SOLO PER VERSIONE MB/PC260)** Se richiesto, attivare il massaggio come illustrato al paragrafo "Istruzioni per l'uso del massaggio"
4. Procedere al trattamento

## MANUTENZIONE

### Pulizia e manutenzione

Pulire la tappezzeria della poltrona solo con acqua tiepida, sapone neutro e un panno morbido.

Le macchie devono essere rimosse immediatamente per evitare che penetrino nel tessuto.

Pulire il telaio della poltrona con un panno leggermente inumidito.

Non strofinare disinfettanti sulla tappezzeria.

Non utilizzare prodotti chimici o detergenti aggressivi che potrebbero causare danni alla tappezzeria.

Non utilizzare sostanze che contengono olio o grasso per pulire la tappezzeria.

Il rivestimento non è resistente ai prodotti chimici e di lavaggio a secco.

### Riparazione e manutenzione


Periodicamente verificare il buon funzionamento dei raccordi idrici e provvedere alla pulizia del sifone di evacuazione.

La poltrona non richiede alcuna manutenzione speciale, se usata correttamente e in conformità con le indicazioni e le istruzioni del produttore.

**(SOLO PER VERSIONE MB/PC260)** Ogni sei mesi ispezionare il telo in PVC dove scorrono le ruote del massaggio ed eventualmente, a seconda della frequenza di utilizzo, lubrificarla con grasso sintetico tipo TOPAS NB 52, come mostrato in fig. 5.

Fig. 5

**RMUOVERE IL CARTER E PROCEDERE ALLA LUBRIFICAZIONE DEL TELLO RETRO MASSAGGIO IN PVC**

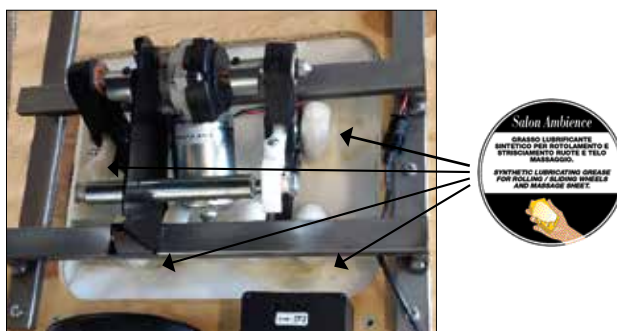

Tuttavia, in caso di qualsiasi eventuale problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Solo le persone autorizzate dal produttore possono effettuare le riparazioni.

Eventuali modifiche o riparazioni eseguite da persone non autorizzate possono comportare la perdita di ogni diritto di garanzia. Inoltre, la sicurezza della poltrona potrebbe essere compromessa.

### Smaltimento

Le diverse parti dell'imballaggio, la poltrona, la tappezzeria ed i relativi accessori devono essere smaltiti in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.



<b>Costruttore</b>	Salon Habitat (Italia) s.r.l. via Enzo Lazzaretti 12 42122 Reggio Emilia www.medicalandbeauty.com info@medicalandbeauty.com
<b>Modello</b>	Atlantis MB/PC260
<b>Funzione</b>	Apparecchiatura di supporto agli operatori nei trattamenti estetici e podologici dotata di poltrona con massaggio dorsolombare
<b>Classe di sicurezza elettrica</b>	II
<b>Anno di costruzione</b>	2020
<b>Alimentazione</b>	100/220-240 V ~ 50-60 Hz
<b>Potenza nominale</b>	110 W
<b>Massimo carico ammesso alla poltrona</b>	130 Kg

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

L'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura Atlantis è realizzata per mezzo di un cavo elettrico con connessione a 8 corredo da inserire nella presa di corrente. Cavo e spina sono forniti con l'apparecchiatura. L'alimentazione elettrica deve essere dimensionata per le seguenti caratteristiche 100/220-240 V ~ 50-60 Hz, monofase. Inoltre l'impianto elettrico deve essere conforme alle Norme Legislative e Regolamentari vigenti nel luogo di utilizzo, e deve essere dotato di interruttore differenziale tale da garantire la protezione delle persone contro i contatti elettrici indiretti. La linea di alimentazione dell'apparecchiatura Atlantis deve essere dotata di protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Collegare la macchina ad una presa di corrente facilmente accessibile verificando che la tensione (V) di rete sia corrispondente alla targa dati della macchina.

- Evitare l'uso di prolunghe, adattatori e spine multiple, quando è possibile, inserire direttamente la spina nella presa elettrica.
- Tenere il cavo d'alimentazione lontano da aree di passaggio in modo da evitare schiacciamenti e da non costituire intralcio od ostacolo al passaggio.
- Mantenere sempre il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o superfici calde. Per evitare pericolose scosse elettriche, utilizzare una presa di corrente munita di alveolo correttamente collegato.

Vi chiediamo di affidarvi al supporto del vostro installatore di fiducia.

#### COMPONENTI ELETTRICI



1. Alimentatore  
7333



2. Centralina  
3885




3. Carrello massaggio  
3888



4. Pulsantiera  
3886

#### ISTRUZIONI PER L'USO DEL MASSAGGIO

Fig. 6

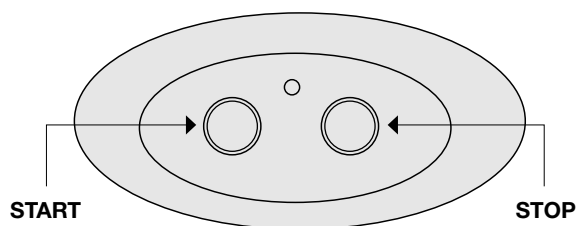

Se richiesto, attivare il massaggio mediante l'apposito tasto, come mostrato in fig. 6.

Il pulsante va tenuto premuto per comandare il moto del massaggio (sia l'attivazione che l'arresto) per un secondo. **La pressione mantenuta di un secondo è concepita per evitare cicli di massaggio indesiderati.**

Un ciclo di massaggio dura 3 minuti. Se si desidera interrompere prima il massaggio premere il pulsante d'arresto, come mostrato in fig. 6. **In ogni caso dopo 3 minuti il massaggio si fermerà in modo autonomo.**

Durante il normale funzionamento, qualora si dovessero palesare:

- Rumori anomali quali ronzii o cigolii
- Odori strani ad esempio di bruciato
- Parti dell'apparecchiatura eccessivamente calde

Interrompere immediatamente l'attività, staccare la spina elettrica dall'alimentazione ed avvertire il servizio assistenza di Salon Habitat Italia srl.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Noi: Salon Habitat (Italia) s.r.l.  
Via Lazzaretti 12  
42122 Reggio Emilia

Attestiamo sotto la nostra completa responsabilità che il prodotto:

**Poltrona podologica con massaggio Atlantis MB/P260**

cui la dichiarazione si riferisce risulta in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche e con la relativa legislazione di recepimento:

- **Direttiva 2006/42/CE** \_  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine
- **Direttiva 2006/95/CE** \_  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- **Direttiva 2004/108/CE** \_  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/366/CEE

Reggio Emilia, 01/01/2022

Il legale rappresentante

Sig. Michael Frott



**Salon Habitat (Italia) s.r.l. via Lazzaretti 12 42122 Reggio Emilia**  
**Sales Italia 0522 276740 International Sales 0522 276755 Fax 0522 276767**  
**info@medicalandbeauty.com • www.medicalandbeauty.com**